

**СОГЛАСОВАНО**

Зам. руководителя Испытательного  
лабораторного центра  
ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена  
Росметтехнологий»



вед.н.с., к.ф.н. А.Г. Афиногенова

2010 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «НПФ «Геникс»



Г.С. Никитин

« 20 »

2010 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 20**

**по применению средства дезинфицирующего  
«НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС»  
фирмы ООО НПФ «Геникс» /Россия/**

2010 год

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО НПФ "Геникс"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принимающей декларацию о соответствии

Зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, № 1021200755289 от 12.02.2003г.

Код по ОКПО: 12910434.

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

424006, Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Крылова, 26, телефон (8362) 64-00-38

адрес, телефон, факс

**в лице** Генерального директора Никитина Геннадия Степановича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

**заявляет, что**

Средство дезинфицирующее "НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС"

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск ТУ 9392-036-12910434-2009

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта), материал

**Изготовитель** ООО НПФ "Геникс".

наименование изготовителя

424006, Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Крылова, 26. Тел. (8362) 64-00-38

адрес и т.д.

Код ОК 005-93 (ОКП): 93 9210

Код ТН ВЭД России:

**соответствует требованиям**

ГОСТ 12.1.007-76 П.п. 1.2, 1.3; "Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации" №01-12/75-97 П.п. 1.1, 1.5, 2.1, 2.5, 2.7, 5.1

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, подпадающих требованиям для данной продукции

**Декларация принята на основании**

Протокола испытаний № 2074-12 от 29.03.2012 г. ИЛЦ ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития России (рег. № РОСС.RU.0001.511173), 195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8; Акта отбора проб № 93/1-Дез/12 от 02.03.2012 г.;

Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.001489.09.10 от 30.09.2010г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

**Дата принятия декларации:** 24.09.2013

**Декларация о соответствии действительна до:** 23.09.2016

М.П.



подпись

Генеральный директор

Никитин Г.С.

инициалы, фамилия

### Сведения о регистрации декларации о соответствии

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрированного декларацию

Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский пр-т, д. 31. Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д.14, стр. 1, тел. (812) 363-30-53, (499) 129-26-00

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 выдан 07.06.2010г. Федеральным Агентством по техническому регулированию

и метрологии

**Дата регистрации** 24.09.2013, **регистрационный номер декларации** РОСС RU.АЯ46.Д51494

дата регистрации и регистрационный номер декларации



подпись

А.Б. Савкин

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации  
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководящий уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.01.002.E.001489.09.10

от 30.09.2010 г.

**Продукция:**  
средство дезинфицирующее "НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-036-12910434-2009 "Средство дезинфицирующее "НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС". Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма "Геникс", 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 26, Российская Федерация.  
Получатель: ООО "Научно-производственная фирма "Геникс", 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 26, Российская Федерация.



Идентификационные признаки, формальные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), адрес(ы)

**соответствует**  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
область применения в соответствии с инструкцией по применению средства от 20.05.2010г. № 20

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
экспертные заключения от 12.05.2010г. № 37-10/ИЛЦ, от 02.08.2010г. № 86-10/ИЛЦ ФГУ "РНИИТО им. П.П. Вредена Росмедтехнологий", рецептура; этикетка; паспорт качества; ТУ 9392-036-12910434-2009; инструкция по применению средства от 20.05.2010г. № 20

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Г.Г. Онищенко

(Ф. И. О. подпись)

М. П.

№0001592

## **Инструкция по применению дезинфицирующего средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» производства фирмы ООО НПФ «Геникс» /Россия/**

Инструкция разработана в Испытательном лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий». Авторы: А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов.

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. акушерских и гинекологических стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов и др.), работников лабораторий широкого профиля, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также учреждений, где предписана антисептическая обработка, и для населения в быту.

### **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1. Средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости, пенящейся при встряхивании, со слабым запахом отдушки или без запаха. Наносится в виде пены, а также в жидком виде или в виде аэрозоля. В качестве действующих веществ содержит полигексаметиленгуанидин гидрохлорид ( $0,5 \pm 0,05\%$ ) и диэцилдиметиламмоний хлорид ( $0,5 \pm 0,05\%$ ), а также аллантоин и другие увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки. Средство выпускается в полимерных флаконах с пенообразующим дозатором (пенообразователем), распылителем и триггером (1 доза при нажатии пенообразователя и триггера соответствует  $0,75 \pm 0,01$  мл средства, 1 доза при нажатии распылителя —  $0,25 \pm 0,01$  мл средства) вместимостью 100-1000 см<sup>3</sup>, а также в полимерных канистрах вместимостью до 5000 см<sup>3</sup>.

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет со дня изготовления.

1.2. Средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» вызывает гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида и трихофитон), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.). Средство сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания. Средство обладает пролонгированным эффектом в течение 3 часов.

1.3. Средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии паров относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно- раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у препарата не выражены.

ПДК в воздухе рабочей зоны ЧАС -  $1,0 \text{ мг/м}^3$  (аэрозоль, 2 класс опасности).

ПДК в воздухе рабочей зоны полигексаметиленгуанидина гидрохлорида  $2,0 \text{ мг/м}^3$ .



1.4. Средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» предназначено:

-для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе стоматологических клиниках), приеме родов в родильных домах и др.;

-для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов;

для обработки локтевых сгибов доноров на станциях переливания крови и др.;

для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, в машинах скорой медицинской помощи, в учреждениях соцобеспечения (домах престарелых, инвалидов и др.), санаторно-курортных учреждениях, пенитенциарных учреждениях, в зонах чрезвычайных ситуаций;

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических

учреждениях, скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, микологических, иммунологических, клинических и других), работников аптек и аптечных заведений, в зонах чрезвычайных ситуаций;

- для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (домах престарелых, инвалидов и др.), санаторно-курортных, спортивных учреждений, пенитенциарных учреждений;

- для гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических, фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий, предприятий общественного питания, торговли (в т.ч. кассиров и др. лиц, работающих с денежными купюрами), пищевой промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатывающая, кондитерская и др.), птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих хозяйств, объектов коммунальных служб (в том числе парикмахерских и косметических салонах, салонах красоты и пр.);

- для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;

- для гигиенической обработки рук, ступней ног, кожи инъекционного поля населением в быту.

А также средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» предназначено для обработки с целью дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе стоматологических клиниках, родильных домах, на объектах в сфере обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны и т.п.) и социального обеспечения, на коммунально-бытовых и пр. объектах, населением в быту:

-небольших по площади помещений, труднодоступных поверхностей в помещениях;

-предметов обстановки (в том числе жалюзи, бактерицидных ламп);

-медицинских приборов и оборудования;

оборудования в клинических, микробиологических и др. лабораториях;

матрасов реанимационных кроватей, не подлежащих дезкамерной обработке;

датчиков к медицинским аппаратам, в том числе к аппаратам УЗИ;

обуви, резиновых и пластмассовых ковриков;

-воздуха;

-перчаток из различного материала, надетых на руки медицинского персонала в микробиологических лабораториях при бактериальных инфекциях, в случае попадания на перчатки инфекционного материала, работников предприятий, выпускающих стерильную продукцию, а также других работников любого профиля.



## 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

**ВНИМАНИЕ!** Средство готово к применению и не требует разбавления!

В зависимости от вида упаковки средство может применяться в виде жидкости, пены или аэрозоля.

### **Применение средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» в виде пены**

2.1. **Гигиеническая обработка рук:** 2,25 мл средства (3 дозы при нажатии пенообразующего дозатора) наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек.

2.2. **Обработка рук хирургов и прочих лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и пр.:** перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют, не менее чем двукратно, теплой проточной водой и мылом, в частности «НИКА-СВЕЖЕСТЬ», в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят дважды по 2,25 мл средства (по 3 дозы при нажатии пенообразующего дозатора) и втирают в кожу кистей рук и предплечий, поддерживая их во влажном состоянии. Общее время обработки составляет не менее 4 мин, общий расход средства составляет 4,5 мл. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.

2.3. **Обработка резиновых перчаток, надетых на руки персонала:** поверхность резиновых перчаток, надетых на руки персонала, обрабатывают путем тщательного протирания средством (норма расхода средства не менее 2,25 мл - 3 дозы при нажатии пенообразующего дозатора). Время выдержки - не менее 1 минута (до полного высыхания поверхности перчаток).

Смывание остатков средства с обработанных перчаток не требуется. Средство не вызывает побочных эффектов и аллергических реакций на слизистых оболочках полости рта при последующих стоматологических вмешательствах.

### **Применение средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» в жидком виде или в виде аэрозоля**

2.4. **Обработка рук хирургов и прочих лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и пр.:** перед применением средства руки тщательно моют теплой проточной водой и мылом, в частности «НИКА-СВЕЖЕСТЬ» в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями двукратно по 5 мл (20 доз при нажатии распылителя) и втирают его в кожу рук, поддерживая их во влажном состоянии в течение 5 минут. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.

2.5. **Обработка операционного поля, в том числе перед введением катетеров и пункцией суставов:** кожу последовательно двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

2.6. **Обработка локтевых сгибов доноров:** кожу последовательно двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 мин.



**2.7. *Обработка инъекционного поля, в т.ч. вместе прививки:***

- кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством; время выдержки после окончания обработки - 30 секунд;
- обработку проводят способом орошения кожи в месте инъекции с использованием распылителя до полного увлажнения с последующей выдержкой после орошения 30 сек.

**2.8. *Гигиеническая обработка рук:*** 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 секунд.

**2.9. *Профилактическая обработка ступней ног:*** обильно смочить ватный тампон (не менее 3 мл на каждый тампон) и тщательно обработать каждую ступню ног разными ватными тампонами, смоченными средством, или ступни ног орошают средством до полного увлажнения кожи; время выдержки после обработки каждой ступни - не менее 30 сек.

**2.10. *Частичная санитарная обработка кожных покровов, профилактика пролежней:*** 3-5 мл средства нанести на марлевый тампон, протереть участки кожных покровов, подлежащие обработке. Время обработки - не менее 30 секунд или до полного высыхания средства.

**2.11. *Обработка резиновых перчаток, надетых на руки персонала:*** поверхность резиновых перчаток, надетых на руки персонала, обрабатывают путем тщательного протирания стерильным марлевым или ватным тампоном, обильно смоченным средством (норма расхода средства не менее 3 мл на тампон). Время выдержки - не менее 1 минута (до полного высыхания поверхности перчаток).

Смывание остатков средства с обработанных перчаток не требуется. Средство не вызывает побочных эффектов и аллергических реакций на слизистых оболочках полости рта при последующих стоматологических вмешательствах.

**2.12.** Средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» применяется для обеззараживания поверхностей из любых материалов и различных объектов способом протирания и орошения. Поверхности орошают средством до полного смачивания с расстояния 30 см или протирают чистой ветошью, смоченной средством.

Расход средства составляет не более 50 мл (в среднем - 30-40 мл) на 1 м<sup>2</sup> поверхности. Средство быстро высыхает (в среднем 10 мин), не оставляя следов на поверхностях.

Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. В случае необходимости поверхности можно протереть стерильными марлевыми салфетками после дезинфекционной выдержки (5 мин), не дожидаясь высыхания. Одновременно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения. Режимы дезинфекции представлены в п.п.2.14-2.16.

В данных режимах обеспечивается обеззараживание объектов при инфекциях бактериальной (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций, микобактерий туберкулеза), вирусной (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В, С, ВИЧ инфекцию, аденовирус и др.), грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

**2.13. *Поверхности, предметы ухода за больными, игрушки, не загрязненные биологическими выделениями,*** протирают салфетками из нетканого материала, смоченными средством «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС" или орошают их средством «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС" с помощью триггера **3 минуты** с экспозиционной выдержкой **3 минуты**.



**2.14. Поверхности, предметы ухода за больными, игрушки загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа:**

**2.14.1.1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией**

Распылить средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» непосредственно на поверхность, которую необходимо очистить.

Протереть поверхность чистой бумажной салфеткой для удаления грязи и биологических загрязнений (пленок).

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов класса Б для дальнейшей дезинфекции и утилизации.

**2.14.2. 2 этап: Дезинфекция поверхностей после очистки**

Распылить средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» непосредственно на предварительно очищенную поверхность, тщательно смочив поверхность препаратом, или протереть ее салфетками, смоченными средством «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС».

**Дезинфекционная экспозиция 5 мин.**

После дезинфекционной выдержки в случае необходимости протереть поверхности стерильными марлевыми салфетками, не дожидаясь их высыхания.

**2.15. Дезинфекция обуви, резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковров.**

Распылить средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» на внутреннюю поверхность обуви и на коврики. **Дезинфекционная экспозиция 5 мин.** После дезинфекционной выдержки обувь протереть чистой бумажной салфеткой,

**2.16. Дезинфекцию воздуха** проводят с помощью соответствующих технических установок или с помощью триггера способом распыления средства при норме расхода 10 мл/м<sup>3</sup>. Предварительно проводят дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. **Дезинфекционная экспозиция 5 мин.** После обработки смывание остатков средства и проветривание помещений не требуется.

### **3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

3.1. Средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» используют только для наружного применения.

3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.


3.3. Избегать попадания средства в глаза.

3.4. По истечении указанного срока годности использование запрещается.

### **4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ**

4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.

4.2. При случайном попадании средства в желудок, рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды).

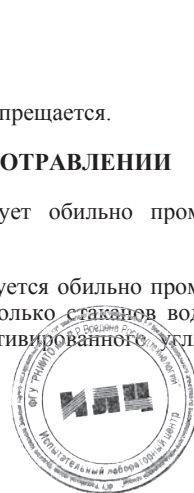



## 5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА СРЕДСТВА

5.1. Средство хранить отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

5.2. Средство транспортируют любыми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта. При случайном разливе средства засыпать его песком или опилками, собрать в емкости для последующей утилизации.

5.3. Средство выпускается в полимерных флаконах с пенообразующим дозатором (пенообразователем), распылителем и триггером (1 доза при нажатии пенообразователя и триггера соответствует  $0,75 \pm 0,01$  мл средства, 1 доза при нажатии распылителя —  $0,25 \pm 0,01$  мл средства) вместимостью 100-1000 см<sup>3</sup>, а также в полимерных канистрах вместимостью до 5000 см<sup>3</sup>.

5.4. Средство сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.

## 6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Дезинфицирующее средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (таблица 1).

Таблица 1. Показатели качества средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС»

Наименование определяемого показателя	Норма
Внешний вид, цвет	Прозрачная бесцветная жидкость, пенящаяся при встряхивании. Допускается в процессе хранения выпадение незначительного осадка. Со слабым запахом отдушки или без запаха
pH средства	5,0-7,0
Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, %	0,5±0,05
Массовая доля дидецилдиметиламмоний, %	0,5±0,05

### 6.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха по ГОСТ 14618.0.

Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25-26 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете. Пробирку устанавливают на лист белой бумаги.

### 6.3. Определение показателя активности водородных ионов (pH).

Показатель активности водородных ионов (pH) измеряют потенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550.

### 6.4. Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлорида

6.4.1 Оборудование, реактивы, растворы:

- весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;
- бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251;
- колба коническая КН-1-50 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой;
- пипетки 4(5)-1 -1, по ГОСТ 29297



- колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770;
- натрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-407-1816;
- цетилпиридиния хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0 % фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации;
- индикатор эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), марки ч., по ТУ 2639-008-56757324;
- хлороформ по ГОСТ 20015;
- натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166;
- натрий углекислый марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 83;
- калий хлористый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4234;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 6.4.2

#### 6.4.2. Подготовка к анализу.

6.4.2.1 Приготовление 0,005 Н водного раствора лаурилсульфата натрия. 0,150 г лаурилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см<sup>3</sup> с доведением объёма дистиллированной водой до метки.

6.4.2.2 Приготовление сухой индикаторной смеси, Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с калием хлористым в соотношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притёртой крышкой в течение года.

6.4.2.3. Приготовление 0,005 Н водного раствора цетилпиридиния хлорида. Растворяют 0,179 г цетилпиридиния хлорида в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 мл с доведением объёма дистиллированной водой до метки.

6.4.2.4. Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора. Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г натрия сернокислого и 10 г натрия углекислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 дм<sup>3</sup> с доведением объёма дистиллированной водой до метки.

6.4.2.5 Определение поправочного коэффициента раствора лаурилсульфата натрия. Поправочный коэффициент приготовленного раствора лаурилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиния хлорида 0,005Н раствором лаурилсульфата натрия.

В мерную колбу<sub>3</sub> вместимостью 50 см<sup>3</sup> к 10 см<sup>3</sup> раствора цетилпиридиния хлорида прибавляют 10 см<sup>3</sup> хлороформа, вносят 30-40 мг сухой индикаторной смеси, приливают 5 см<sup>3</sup> буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиния хлорида раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора лаурилсульфата натрия по формуле:


$$K = \frac{V_{цп}}{V_{лс}}$$

где V<sub>цп</sub> - объём 0,005 Н раствора цетилпиридиния хлорида, см<sup>3</sup> ;  
V<sub>лс</sub> - объём 0,005 Н раствора лаурилсульфата натрия, пошедшего на титрование, см<sup>3</sup> .

6.4.2.6. Приготовление раствора анализируемого средства. Навеску анализируемого средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» массой 20,0±0,5, взятую с точностью до 0,0002г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и объём доводят дистиллированной водой до метки.

#### 6.4.3 Проведение анализа.

В коническую колбу или цилиндр с притёртой пробкой вместимостью 50 см<sup>3</sup> вносят 5 см<sup>3</sup> полученного раствора средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» (см. п.6.4.2.6.), 10см<sup>3</sup> хлороформа, 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 10 см<sup>3</sup> буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Полученную двухфазную систему титруют раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю.

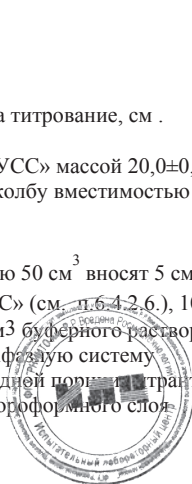

#### 6.4.4. Обработка результатов.

Массовую долю четвертичных аммониевых соединений (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X_{\text{час}} = \frac{0,00189 \times V_{\text{час}} \times K \times V_1 \times 100}{m \times V_2},$$

где 0,00189 - масса четвертичных аммониевых соединений, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией точно C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>Na)=0,005 моль/дм<sup>3</sup> (0,005Н), г;

V<sub>час</sub> - объём раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>Na)=0,005 моль/дм<sup>3</sup> (0,005Н), пошедший на титрование, см<sup>3</sup>;

K - поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>Na)=0,005 моль/дм<sup>3</sup> (0,005Н); m - масса анализируемой пробы, г;

V<sub>1</sub> - объём, в котором растворена навеска средства «Ника-антисептик аквамусс» равный 100 см<sup>3</sup>;

V<sub>2</sub> - объём аликвоты анализируемого раствора, отобранной для титрования (5 см<sup>3</sup>).

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 3,0% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.

#### 6.5. Определение массовой доли полигексаметиленгуанидина гидрохлорида.

##### 6.5.1 Средства измерения, реактивы и растворы:

- весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;
- бюретка 1 -1 -2-25-0,1 по ГОСТ 29251;
- колба коническая КН-1 -50 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой;
- пипетки 4(5)-1-1, по ГОСТ 29227;
- колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770;
- цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770;
- натрия лаурилсульфат (додecilсульфат) по ТУ 6-09-407-1816;
- индикатор бромфеноловый синий, марки ч.д.а., по ТУ 6-09-5421;
- хлороформ по ГОСТ 20015;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- спирт этиловый, по ГОСТ 18300.

##### 6.5.2. Подготовка к анализу.

###### 6.5.2.1. Приготовление 0,05% раствора бромфенолового синего.

Растворяют 0,05 г бромфенолового синего в 20 см<sup>3</sup> этилового спирта в мерной колбе вместимостью 100 см<sup>3</sup> с доведением объёма дистиллированной водой до метки.

###### 6.5.2.2. Приготовление 0,005Н водного раствора лаурилсульфата натрия.

Применяют раствор лаурилсульфата натрия приготовленный в соответствии с п.

6.4.2.1. Поправочный коэффициент определяют в соответствии с п. 6.4.2.5.

###### 6.5.2.3. Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора.

Применяют буферный раствор, приготовленный в соответствии с п. 6.4.2.4.

##### 6.5.3. Проведение анализа.

В коническую колбу, либо в цилиндр с притёртой пробкой вместимостью 50 см<sup>3</sup> вносят 5 см<sup>3</sup> полученного раствора средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» (см. п. 6.4.2.6.), 10 см<sup>3</sup> хлороформа, вносят 0,080 см<sup>3</sup> раствора бромфенолового синего и приливают 25 см<sup>3</sup> буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор до обесцвечивания водного слоя. Полученную двухфазную систему титруют 0,005 н раствором лаурилсульфата натрия. После добавления окраска индикатора титранта в колбе встряхивают.



Изменение окраски водного слоя контролируют, наблюдая в проходящем свете. В конце титрования развивается фиолетовая окраска водного слоя.

#### 6.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю полигесаметилenguанидина гидрохлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{0,00089 \times (V - V_{\text{час}}) \times K \times V_1 \times 100}{m \times V_2},$$

где 0,00089 - масса полигесаметилenguанидина гидрохлорида, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C(C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub> Na)=0,005 моль/дм<sup>3</sup> (0,005Н), г;

V<sub>час</sub> - объём раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub> Na)=0,005 моль/дм<sup>3</sup> (0,005Н), пошедший на титрование ЧАС (см. п.6.4.), см<sup>3</sup>;

V - объём раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub> Na)=0,005 моль/дм<sup>3</sup> (0,005Н), пошедший на титрование суммы ЧАС и ПГМГ (см. п. 6.5.3.), см<sup>3</sup>;

K - поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией C (C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub> Na)=0,005 моль/дм<sup>3</sup> (0,005Н);

m - масса анализируемой пробы, г;

V<sub>1</sub> - объём, в котором растворена навеска средства «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС», равный 100 см<sup>3</sup>;

V<sub>2</sub> - объём аликвоты анализируемого раствора, отобранный для титрования (5 см<sup>3</sup>).

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 6,0% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.

